

見守りカメラシステム

AI 画像認識
で解析判定
高度なセンシングを実現

PLAINH NICSS **NICSS-EX8** 対応



見守りカメラ

起床

端座位

離床

離床動作を検知してナースコールで通知します。



NICSS親機

!	起床	経過時間	00:06	対応する
801-1	呼出中			
伊東 太郎	担当看護師 佐藤	担当看護師内線番号 1000		
伊東 太郎	チーム D			



スマートフォン

NICSS親機やスマートフォンには
画像を表示します。



複数人物の検知イメージ

AIで誤報を防止

- 面会者やスタッフが同一映像内に映り込み、複数の人物を検知した場合には通知をしません。ケアする際のセンサー切り忘れによる誤報も防ぎます。
- 患者さんが就寝から離床する方向の動きだけを通知します。就寝に戻る動作は通知しません。

訪室する前に画像で確認。
動線の短縮や非接触のケアをサポートします。

ケアコム

<https://www.carecom.jp/>



上下スライド機構で
工具不要の簡単着脱



カメラ不要な場合は
ブラंकプレート取付

着脱可能

専用取付金具でカメラの着脱が可能です。
見守りが必要な患者さんのベッドサイドに
設置して使用できます。

検知範囲を自動設定

カメラが自動でベッドの形状を判定して
離床動作の検知範囲を設定。
面倒な設定は不要です。



検知範囲イメージ

録画再生

離床動作を検知した前後の画像
を自動で録画。
転倒した際の画像を確認するこ
とで、ケガの部位の推測や対策
に役立ちます。

●REC


常時モニタリング

NICSS親機画面上で
訪室することなく見守れます。
5床まで同時表示可能です。



構成図

LAN

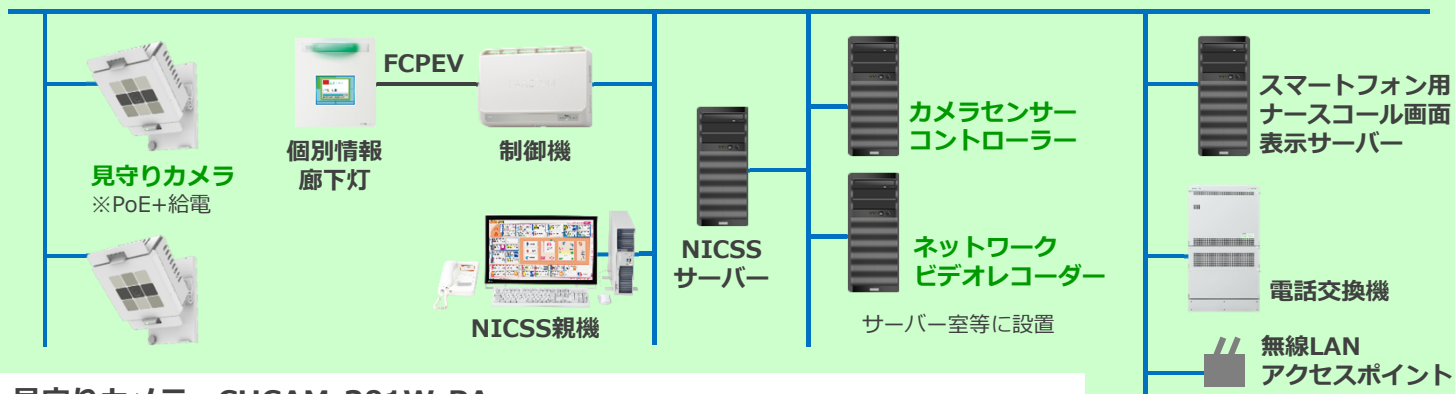

見守りカメラ CHCAM-301W-PA

□本体寸法(mm)／W87×H87×D36 □質量／約260g □電源／PoE+給電(IEEE802.3at 準拠)
またはACアダプタ: 5V 3.2A □推奨取付位置／ベッド頭部側壁面 床面からレンズ位置までの
高さ1700~1800mm ※取付には取付金具(HZ-CVRK/C301)、取付プレート(HP-CVRK/C301)、
ブラंकプレート(HP-CVRK/C301BP)が必要です。